


- Schulterchirurgie
- Schulterprothese
- Oberarm und Schlüsselbein
- Osteosynthese
- Mehr-Nutzung S. 2

SAMARIT
safe moving and handling

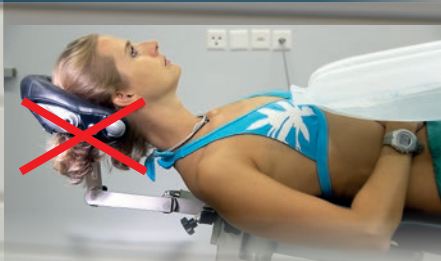

Früher, nur mit Kopfkalotte

Beach-Chair – Lagerung heute!


- Das neu entwickelte Spezialkissen ermöglicht eine optimale ergonomische Lagerung für Kopf, Hals und Rücken.
- Erleichterte Intubation in Rücken oder Beach-Chair – Lagerung.
- Die BEACH-CHAIR Schiene wird mit dem Thoraxgurt am Patienten fixiert. Kinn- und Stirnband mit Polster dienen der sicheren Positionierung des Kopfes.
- Vereinfacht und verkürzt die Lagerung sowie den Zeitaufwand.
- Patienten haben postoperativ weniger Beschwerden im Hals- und Nackenbereich.
- Die BEACH-CHAIR Schiene schützt die Wirbelsäule bei ungewolltem Wegfall der Kopfkalotte und verhindert einen Metallkontakt zu derselben.



«**BEACH-CHAIR**» – die OP-Schiene Die sichere Lagerung im OP.

Die BEACH-CHAIR Schiene wurde zur Unterstützung des Anästhesie-Personals bei der Intubation konzipiert. Eine bequeme und sichere Lagerung des Patienten und Zeiteinsparung für das Lagerungspersonal werden erreicht.

Die BEACH-CHAIR Schiene wurde mit der praktischen Erfahrung eines Lagerungs-Spezialisten zusammen mit Samarit Medical AG entwickelt.

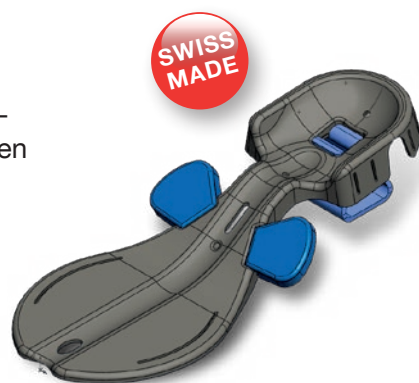



Einfach in der Anwendung.

Legende

- A. BEACH-CHAIR Schiene
- B. Neues ergonomisches Kissen
- C. Abnehmbare Flügel beidseits
- D. Thoraxplatten mit Gurten
- E. Trapezfixierung
- F. Vertiefung für Wirbelsäule
- G. Einwegpolster für Kinn- und Stirnfixation

Die BC-Schiene besteht aus **Spezial-Kunststoff**, ist röntgendurchlässig, ohne Metall und latexfrei.

Das neue **ergonomische Kopf-, Hals- und Rückenkissen** ermöglicht eine optimale Lagerung.

Die BC-Schiene verfügt über zwei **schulterunterstützende Flügel** die einzeln entfernt werden können.

Beim Einsatz der BC-Schiene auf einem **OP-Tisch** wird die **Kopfschale** mit der **Trapezfixierung** in der Höhe gesichert.

Beidseitig verstellbare Gurtenbänder



Zwei **Thorax-Platten** kombiniert mit sicheren Gurten erhöhen die Stabilität des Thorax.


Bänder für Kinn- und Stirnfixation



Verstellbare Flügel für offene und geschlossene Schulter – OP's




Trapezfixierung für den Einsatz auf OP-Tischen

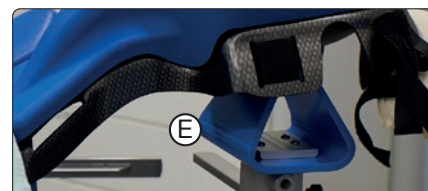

Die BC-Schiene kann auch für Operationen ohne Beach-Chair – Lagerung verwendet werden, z.B. bei:

- Gesichtschirurgie (MKG)
- Carotis
- Struma

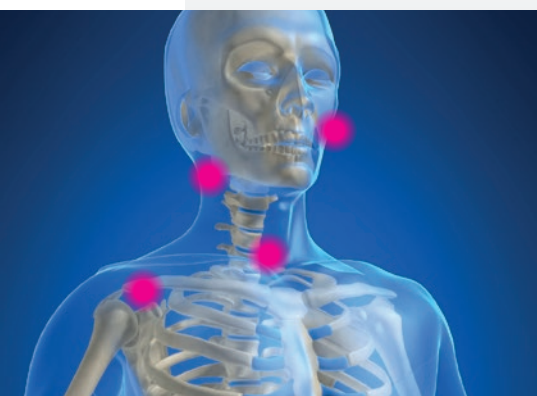



Vielseitig einsetzbar.

Die Probleme sind bekannt – wir haben die Lösung.



Früher, nur mit Kopfkalotte



Heute, mit BEACH-CHAIR Schiene



Die Lösung

Samarit bietet die Lösung


Nach länger dauernden Operationen beklagen sich Patienten häufig über schwere Hals-, Nacken- und Kopfschmerzen. Dies ist oftmals die Folge der unsachgemässen Lagerung respektive der fehlenden Hals-, Nackenunterstützung ohne unser ergonomisches BC-Kissen.

Die BEACH-CHAIR Schiene bietet Sicherheit, verbessert die Lagerung und verhindert Druckstellen.

Die BEACH-CHAIR Schiene löst für die OP-Crew die bekannten Lagerungsprobleme.


Die BEACH-CHAIR Schiene schliesst die Lücke zwischen Operationstisch und Kopfkalotte, und vermeidet unnötige Risiken.

BEACH-CHAIR Schiene, die geniale Erfindung ist vielseitig einsetzbar, einfach in der Anwendung, sicher für die Operateure und Anästhesisten und komfortabel für die Patienten.

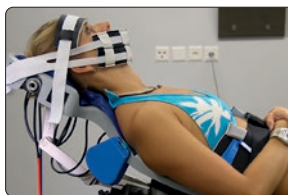

BEACH-CHAIR

SAMARIT
safe moving and handling

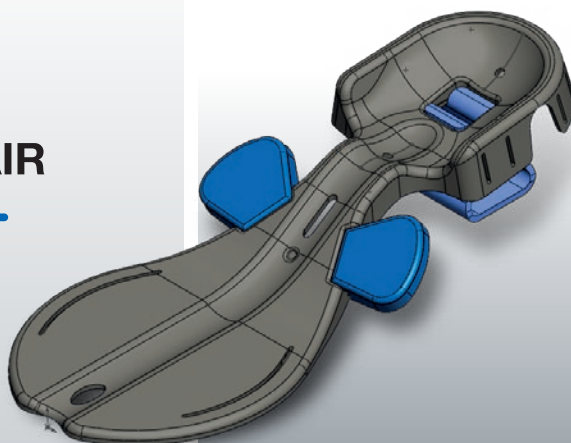

Haftpflichtfälle sind im Bereich der Lagerung ein vermeidbares Problem.

Prüfen Sie unser bewährtes Produkt und verlangen Sie eine Vorführung mit Angebot.



BEACH-CHAIR Schiene

(inkl. 5 Sets Verbrauchsmaterial)

Model No. 420.2002

Verbrauchsmaterial (10er Set)

Set-Inhalt (Einwegprodukte)

Model No. 420.0010 B

① 1 Stirnpolster, ② 1 Kinnpolster, ③ 2 Thoraxpolster, ④ 1 Flügelpolster



Patentierte BC-Antirutschkissen



Small
Model No. 420.2020



**Auflage
für Small und Big**
Model No. 420.2030



Big
Model No. 420.2040

www.samarit.com



Rollbord™



Blue Transfer Board



TRANSGLIDE



Glidebord

Für weitere Samarit Produktebroschüren, kontaktieren Sie uns, Ihren Fachhändler oder laden Sie diese in Ihrer Sprache von unserer Website herunter.

SAMARIT
safe moving and handling

Samarit Medical AG
Gewerbstrasse 12
CH-8132 Egg, Schweiz
Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39
e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

