

- Chirurgia della spalla
- Protesi della spalla
- Braccio superiore e clavicola
- Osteosintesi
- Multiuso p. 2

SAMARIT
safe moving and handling



Prima, solo con calotta

Oggi, in posizione Beach-Chair!


- Lo speciale cuscino di nuova concezione consente un posizionamento ergonomico ottimale per la testa, il collo e la schiena.
- Intubazione facilitata in posizione prona o nella più facile posizione semiseduta (Beach-Chair).
- Il dispositivo BEACH-CHAIR viene fissato al paziente con la cintura toracica. La mentoniera e la fascia per la testa con imbottitura sono utilizzate per posizionare in modo sicuro la testa.
- Agevola il posizionamento del paziente e consente un minor dispendio di tempo.
- Riduce il dolore postoperatorio dei pazienti a livello del collo e della nuca.
- Il dispositivo BEACH-CHAIR protegge la colonna vertebrale da indesiderate cadute della calotta, evitando al contempo un contatto metallico con la stessa.



«**BEACH-CHAIR**» – Il dispositivo garantisce un posizionamento sicuro in sala operatoria.

Il dispositivo BEACH-CHAIR è stata specificamente concepita per fornire supporto al personale di anestesia durante l'intubazione del paziente. Rende possibile un posizionamento comodo e sicuro del paziente e un risparmio di tempo del personale addetto alle manovre di posizionamento.

Il dispositivo BEACH-CHAIR è stata sviluppata sulla base dell'esperienza pratica di uno specialista del posizionamento in collaborazione con Samarit Medical AG.

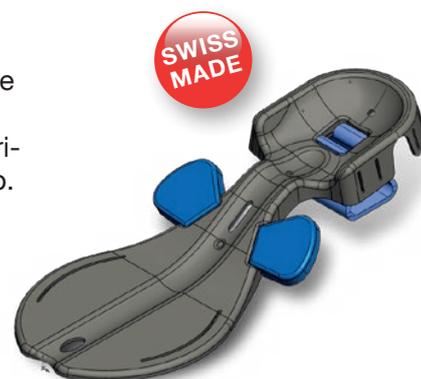



Semplicità d'uso.

Legenda

- A. Dispositivo BEACH-CHAIR
- B. Nuovo cuscino ergonomico
- C. Supporti asportabili su entrambi i lati
- D. Piani torace con cinghie
- E. Fissazione trapezoidale
- F. Incavo per la colonna vertebrale
- G. Cuscinetto monouso per il fissaggio del mento e della fronte

Il dispositivo BC è realizzato in **plastica speciale**, è radiotrasparente, privo di metallo e di lattice.

Il nuovo cuscino **ergonomico per testa, collo e schiena** consente un posizionamento ottimale.

Il dispositivo BC è dotato di due ali di sostegno per le spalle che possono essere rimosse singolarmente.

Quando si utilizza il dispositivo BC su un **tavolo operatorio**, il **guscio della testa** viene fissato saldamente in altezza con il **fissaggio trapex**.

Cinghie regolabili bilaterali



Due **piani torace abbinati** alle cinghie di sicurezza consentono di aumentare ulteriormente la stabilità del torace.


Fascette di fissaggio per il mento e per la fronte



Supporti regolabili per interventi chirurgici alla spalla aperti e chiusi



Fissaggio trapex per l'uso su tavoli operatorio

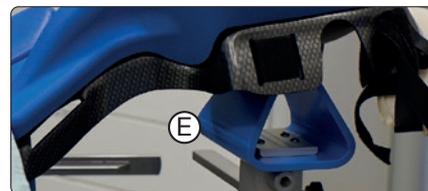

Il dispositivo BEACH-CHAIR può essere utilizzata anche per gli interventi in cui il paziente non deve essere posto in posizione Beach-Chair, ad esempio:

- Chirurgia facciale
- Carotide
- Struma





Versatilità di impiego.

I problemi li conosciamo - ora abbiamo la soluzione.



Prima, solo con calotta



Oggi con il dispositivo BEACH-CHAIR



La soluzione

Samarit offre la soluzione

Dopo interventi chirurgici di considerevole durata, i pazienti accusano spesso forti dolori al collo, alla nuca e alla testa, frequentemente causati dalla scomoda posizione assunta a causa della mancanza di un appoggio per il collo e/o per la nuca. Spesso la causa è il posizionamento scorretto o la mancanza di supporto per il collo senza il nostro cuscino ergonomico BC.

Il dispositivo BEACH-CHAIR offre sicurezza, migliora il posizionamento ed evita i punti di pressione.

Il dispositivo BEACH-CHAIR consente all'equipe chirurgica di risolvere i noti problemi di posizionamento del paziente.


Il dispositivo BEACH-CHAIR permette di riempire la fessura che viene a crearsi fra il tavolo operatorio e la calotta, per evitare inutili rischi.

Realizzata con geniale inventiva, il dispositivo BEACH-CHAIR coniuga versatilità d'uso, facilità d'impiego, sicurezza per gli operatori e gli anestesisti e comfort per il paziente.



BEACH-CHAIR

SAMARIT
safe moving and handling

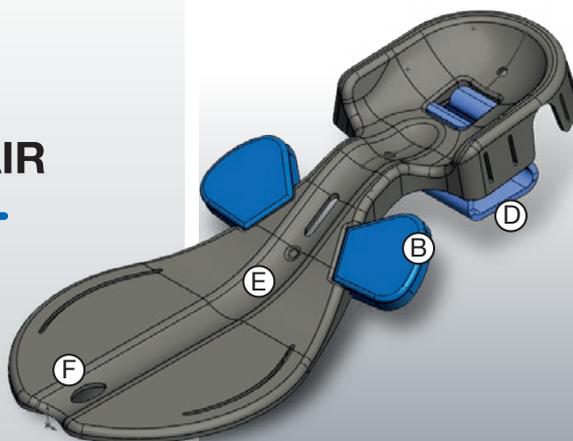

I casi di responsabilità sono un problema evitabile nel settore del magazzinaggio.

Provate il nostro prodotto collaudato e richiedete una dimostrazione con un preventivo.



Dispositivo BEACH-CHAIR

(incl. 5 set di materiali di consumo)

N. modello 420.2002

Materiale di consumo (Set da 10)

Contenuto del set (prodotti monouso)

N. modello 420.0010 B

① Imbottitura per la fronte, ② Mentoniera, ③ 2 Imbottitura per il torace



Cuscini antiscivoli BC brevettati



Small
N. modello 420.2020



Cuscino imbottito per Small e Big
N. modello 420.2030



Big
N. modello 420.2040

www.samarit.com



Rollbord™



Blue Transfer Board



TRANSGLIDE



Glidebord

Per ulteriori brochure sui prodotti Samarit, contattate noi, il vostro rivenditore specializzato o scaricatele nella vostra lingua dal nostro sito web.

SAMARIT
safe moving and handling



Samarit Medical AG
Gewerbstrasse 12
CH-8132 Egg, Schweiz
Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39
e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com